

Serie Model
One.



La elección correcta.

Un sinfín de posibilidades.

Disfruta de las numerosas opciones entre las que elegir. Puedes personalizar hasta el más mínimo detalle de la unidad dental para responder a todas las necesidades.

Un diseño atemporal.

La base del diseño y los materiales utilizados en Model One se inspiran en nuestra línea de clase superior, Model Pro. El diseño sigue una serie de principios ergonómicos de probada eficacia. Disfruta de la versión básica para realizar cómodamente las actividades principales del día a día.

Un aliado de confianza.

Model One está construido con un sistema mecánico y electrónico similar a Model Pro, pero simplificado en comparación con esa línea más avanzada. Se fabrica con materiales de primera calidad.

Su tecnología de fabricación se estandarizó con nuestra línea más avanzada y se ensayó demostrando su fiabilidad mucho antes del estreno del producto en el mercado. Cada unidad dental se somete a pruebas exhaustivas antes de su envío a los clientes.

La elección correcta.

¿Buscas la unidad dental adecuada que ofrezca un rendimiento extraordinario y proporcione una comodidad excepcional a tus pacientes a un precio competitivo? Model One podría ser un gran acierto.



Model One 100.



Model One 200.





Model One 100 Ortho.



Model One 100.

Versión de soporte

Model One 100.

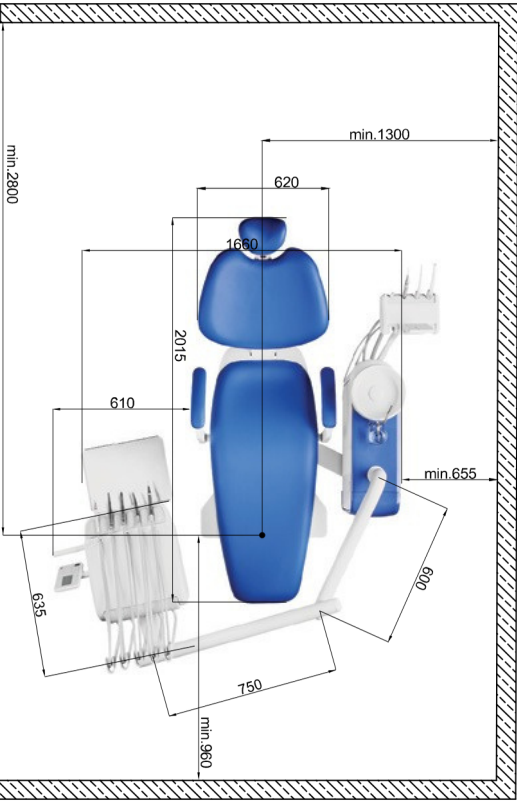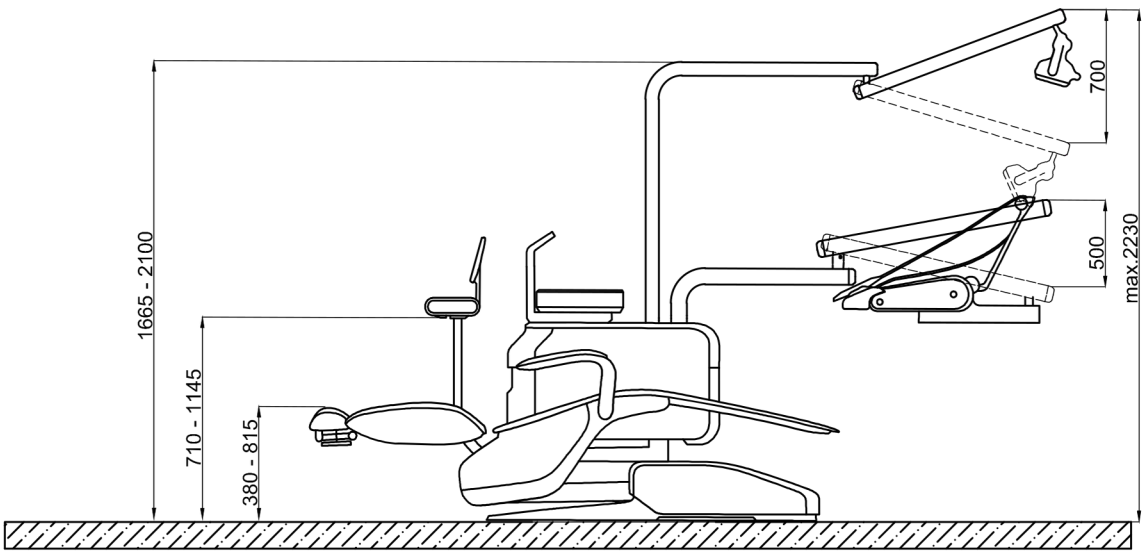

Unidad dental con movimiento sincronizado entre el bloque de escupidera y el sillón del paciente. Todo ello para permitir mantener una distancia óptima de la escupidera durante las etapas de enjuague bucal, independientemente de la estatura del paciente.



Ambos modelos están equipados con un robusto mecanismo de movimientos del sillón, capaz de soportar hasta 200 kg, lo que los convierte en una opción excelente para clínicas con gran volumen de pacientes.



Model One 200.

Versión elevada

Model One 200.

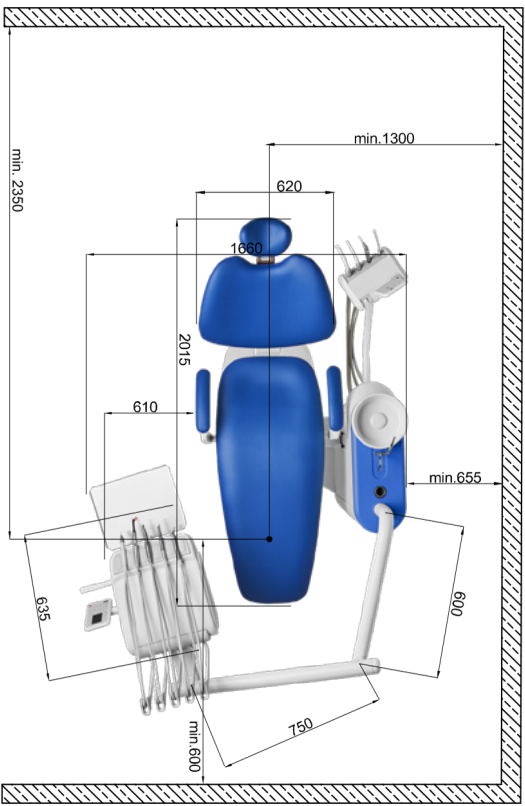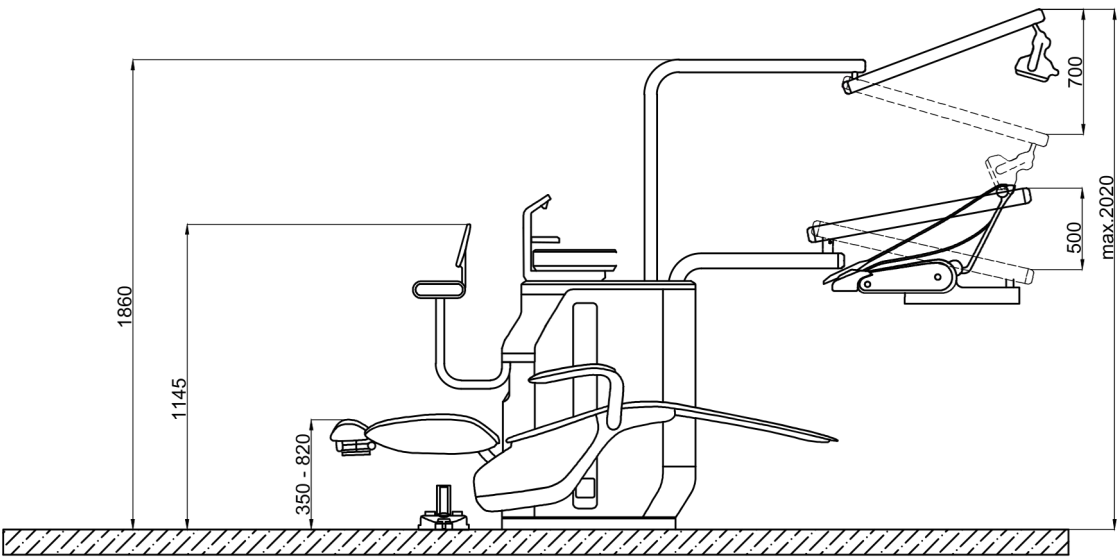

Unidad dental con el sillón de paciente suspendido y el grupo hídrico de columna instalado en el suelo. Perfecto para clínicas de espacio reducido gracias a su diseño compacto. El asiento se puede bajar considerablemente para facilitar el acceso de cada paciente (posibilidad de descenso hasta 350 mm del suelo).



Ambos modelos están equipados con un robusto mecanismo de movimientos del sillón, capaz de soportar hasta 200 kg, lo que los convierte en una opción excelente para clínicas con gran volumen de pacientes.



Model One 100 Ortho.

Model One 100 Ortho.

Diseñado para ortodoncistas.
Diseñado para laprecisión.

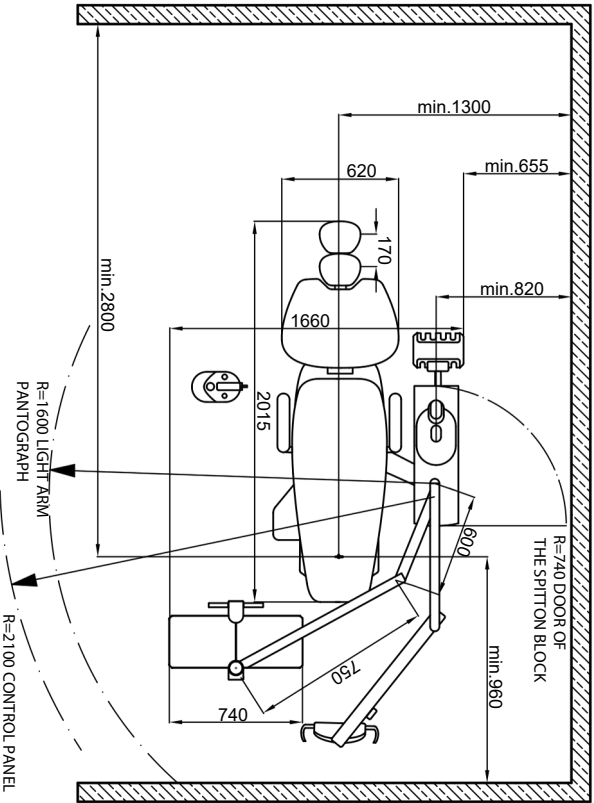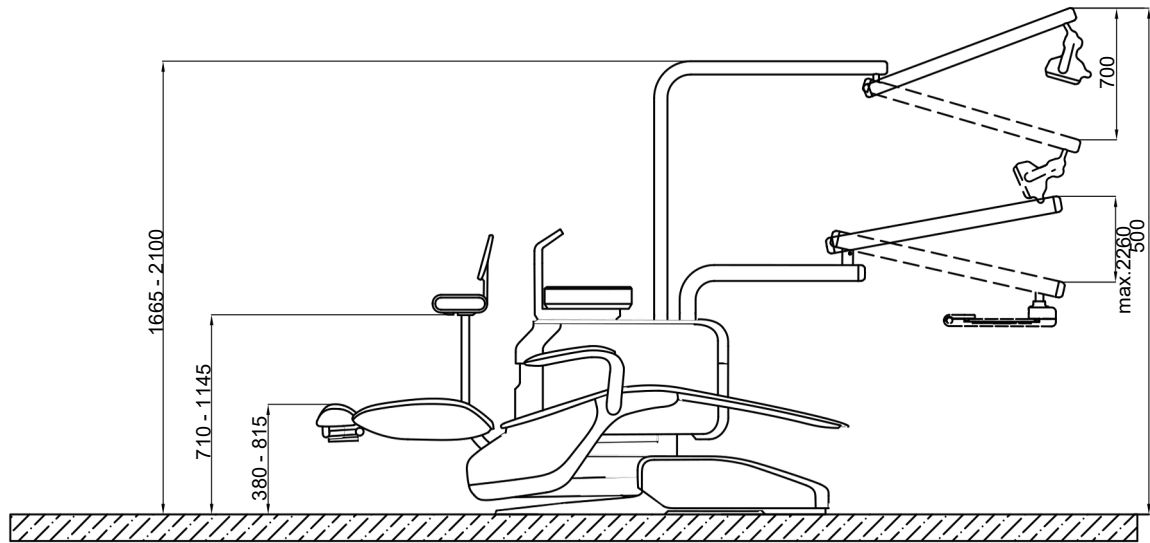

Los ortodoncistas merecen una solución adaptada a sus necesidades – Diplomat Dental cumple con ello. El modelo One 100 Ortho está diseñado exclusivamente para profesionales de la ortodoncia. Optimizado para los flujos de trabajo ortodóncicos, elimina funciones innecesarias y se enfoca en lo que realmente importa: eficiencia, comodidad y una atención al paciente fluida.

- Sillón dental diseñado exclusivamente para ortodoncistas.
- Optimizado para tu flujo de trabajo – sin funciones innecesarias.
- Eficiencia, comodidad y atención al paciente sin interrupciones.
- Diseño atemporal.

Un sinfín de posibilidades.

Imagina la unidad dental de tus sueños. Hazlo realidad con Model One. Con un sinfín de opciones de personalización, el aspecto y el funcionamiento de tu Model One dependen solo de ti.


¿Arriba o abajo?

de suministro de mangueras colgantes o en colibrí.



Sujeta el brazo oscilante.

La bandeja de instrumentos con mangueras en colibrí permite su uso con un bloqueo del brazo oscilante. El brazo del instrumento se conduce colocado en su alojamiento correspondiente. Para desbloquear el brazo, basta con tirar del mismo hacia el tope. Luego, el brazo regresa a la posición de reposo.

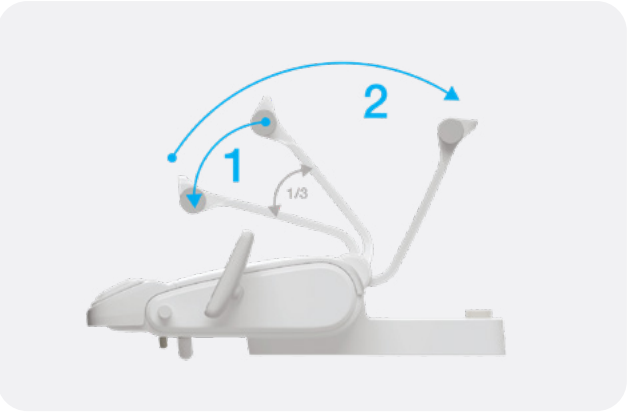

Muestra tus habilidades.

El panel de mandos de la bandeja de instrumentos se ofrece en dos variantes. En ambas, la botonera incluye controles para el manejo de las cuatro posiciones personalizadas del sillón y la posición de acceso. También existe la opción de preprogramar dos posiciones personalizadas del dentista para ambas variantes.



Control panel One.

El panel de control estándar viene con una pantalla de 5 dígitos que proporciona información sobre las RPM del micromotor utilizado. Esta versión del panel de control incluye botones para el control del sillón, la lámpara, llenado de vaso, escupidera y negatoscopio.

- 1

Mandos para el control de la lámpara, llenado de vaso y escupidera.
- 2

Mandos para el control del sillón.
- 3

Mandos de ajuste de los instrumentos.*



Control panel One Plus.

El panel de control avanzado incluye una pantalla a todo color y botones adicionales para controlar las funciones endodónticas de los instrumentos. Esta opción también es compatible con un sistema de higienización automática.

Control intuitivo de los instrumentos.

Los instrumentos de la bandeja se activan una vez extraídos de sus respectivos soportes.

Un solo mando para controlarlo todo.

Los ajustes de los instrumentos se pueden personalizar con cuatro configuraciones predefinidas.



Indicadores LED multicolores en el panel de control One.

Para facilitar el flujo de trabajo del dentista durante el uso del panel de control One, hemos incorporado una serie de intuitivos indicadores LED multicolores para la señalización del cambio de funcionalidad.

	LÁMPARA APAGA-DA	LUZ BLANCA	LUZ VERDE	LUZ AZUL
	Enfriamiento	Refrigeración por pulverización	Refrigeración por agua	Refrigeración por aire

Elige tu aparato de Ultrasonido.

La seleccióndeaparatosdelimpiezacompatiblesconelpanel de control One Plus de Model One incluye:



KIT APARATO DE LIMPIEZA	PERIO	ENDO	SCALING & GENERAL	BOOST
Satelec SP Xinetiс	•	•	•	
Satelec NEWTRON	•	•	•	•
Satelec NEWTRON LED	•	•	•	•
NSK VA170	•	•	•	
NSK VA170 LED	•	•	•	
WOODPECKER		•	•	
EMS	Las curetas EMS no tienen funciones específicas. Su rango de intensidad es de 0 a 10, lo que corresponde a todos los modos de trabajo disponibles.			



Funciones endodónticas.

El panel de control One Plus con micromotor DX Pro o DX Pro Blue permite utilizar funciones endodónticas adicionales. Estas incluyen las funciones de retroceso y avance automáticos.

Existe la posibilidad de ajustar el rango de velocidad de 100 a 40.000 RPM y el par es ajustable a 3,5 Ncm.


¡Y sin embargo se mueve!

La versión estándar de la escupidera de Model One está fijada en grupo hidrónico. Sin embargo, para mejorar la comodidad de los pacientes, puede elegir la opción giratoria. Ambas escupideras son extraíbles para facilitar la limpieza diaria.



¿Qué luz enciendes?

Puedes elegir entre las lámparas dentales XENOS, MAIA o SIRIUS. La lámpara XENOS alcanza hasta 26.000 Lux. La MAIA ofrece hasta 39.000 ±5% Lux con un CRI > 95. SIRIUS ofrece un rendimiento aún mayor dependiendo de la configuración siguiente. Todas las lámparas tienen funciones de operación manos libres gracias al sensor sin contacto.

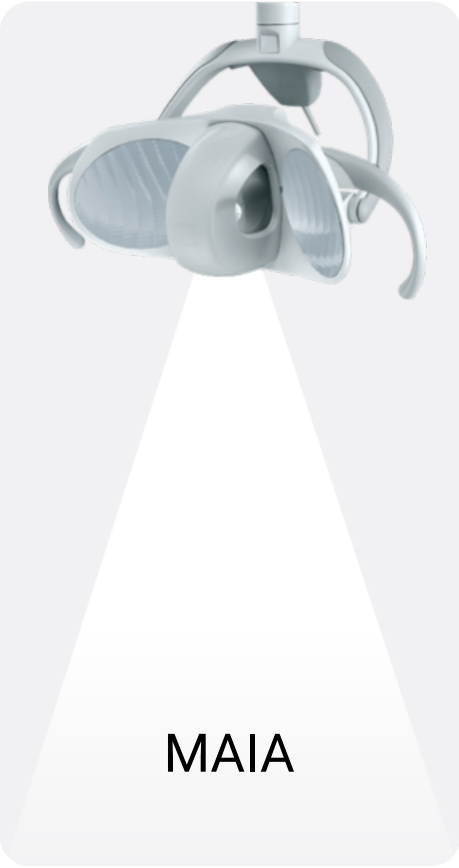

SIRIUS



Disponible en varias opciones

SIRIUS Essential	SIRIUS Power
4 x LED white	8 x LED
35 000 Lux	50 000 Lux
Temperatura LED 5500 K	Temperatura LED 5500 K
No modo composite	Modo composite ("Amarillo" – luz con filtro de longitud de onda azul 430–480 nm)
Zona de iluminación definida y precisa	Área de iluminación definida
Ajuste continuo de la intensidad luminosa de 0 a 100% sin escalones	Ajuste continuo de la intensidad luminosa de 0 a 100% sin escalones
SIRIUS Plus	
8 x LED	
35 000 Lux	
Temperatura LED 5500 K	
Modo composite ("Amarillo" – luz con filtro de longitud de onda azul 430–480 nm)	Four steps adjustment of illumination intensity across the full min/max range (at LED temperature 4000–4800 K)
Área de iluminación definida	
Ajuste continuo de la intensidad luminosa de 0 a 100% sin escalones	

Pedal a fondo.

Aunque tal vez no sientas la misma adrenalina que en un coche de carreras, el uso de los controladores de pie aporta toda una serie de ventajas ergonómicas y prácticas. Puedes elegir entre cuatro opciones compatibles con Model One.



MARQUARDT

Carcasa estable y antideslizante fabricada en termoplástico y provista de patas de goma.



NOK

Pedal multifuncional de accionamiento vertical para el control de los instrumentos, el sillón y el grupo hídrico.



SWING

Pedal multifuncional de accionamiento horizontal para el control de los instrumentos, el sillón y el grupo hídrico. Ergonomía mejorada y control fácil del rociado de los instrumentos mediante palanca.

Listo para otro par de manos.

El área del auxiliar dispone de seis soportes para instrumentos. Existen dos versiones disponibles: BÁSICA y AVANZADA. El área del auxiliar en la variante BÁSICA permite al auxiliar controlar el lavado de la escupidera y el llenado de vaso. Con el área del auxiliar en la versión AVANZADA, también podrás controlar los movimientos del sillón, incluida la posición de Trendelenburg.




Configuraciones posibles.

- Brazo asistente pantográfico (como en el Model Pro)
- Panel de control One
- Mangueras de aspiración
- Jeringas
- Turbina (máx. 1)
- Micromotor (máx. 1)
- Escalador
- Lámpara de fotopolimerización
- Cámara intraoral



Ver más opciones en la página 40.

Model One 100 Ortho.

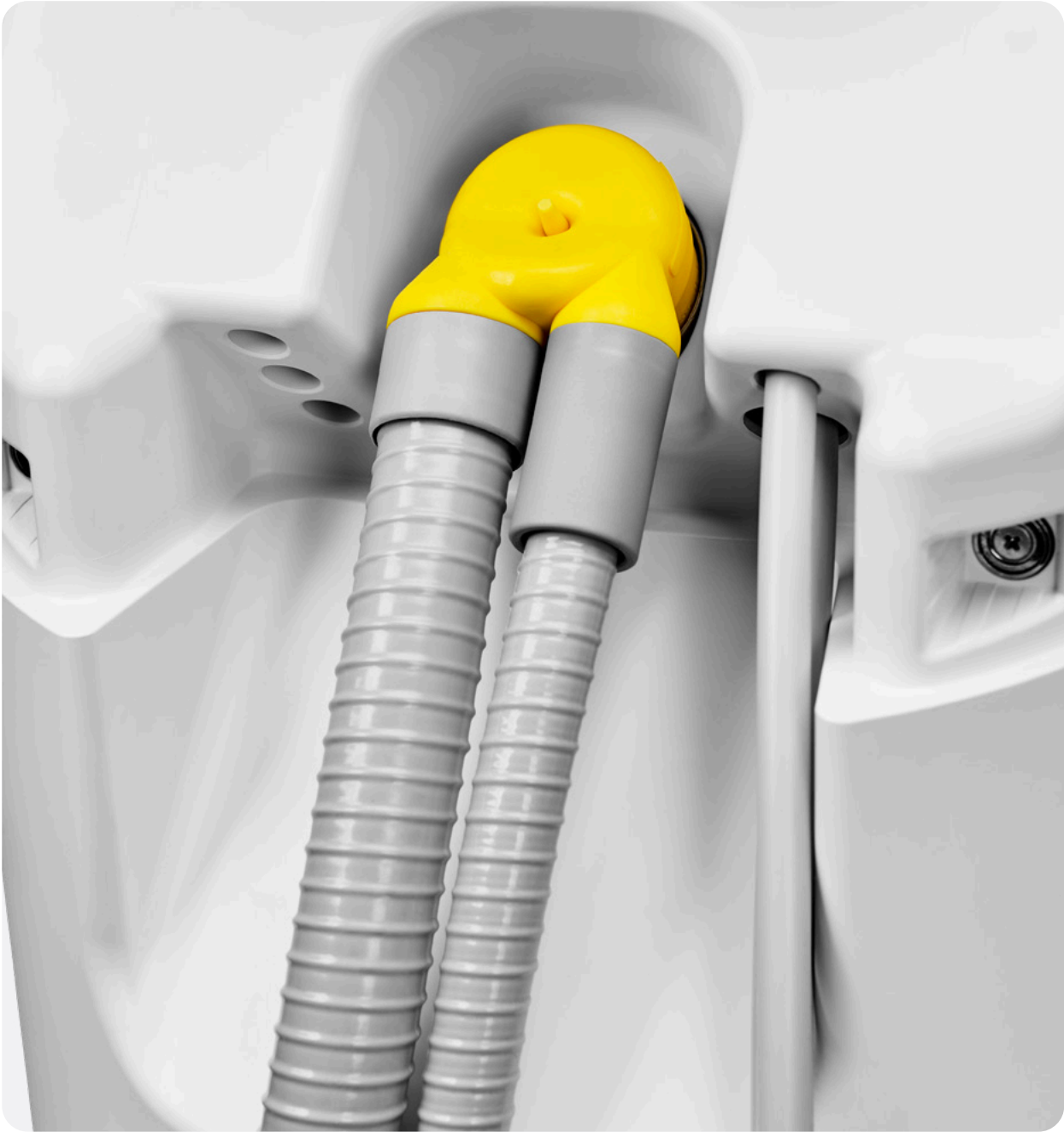

Manual, automatico del Model One.

ModelOne está provisto de un sencillo sistema de higienización manual en la versión estándar, ofreciendo la posibilidad de ampliación a un sistema automático. El mantenimiento de Model One es rápido y sencillo, independientemente de la versión elegida.

Incluso la desinfección manual es una tarea fácil.

Incluso si elige la versión estándar del Model One, dispondrá de un sistema de higiene manual, gracias a la botella integrada. Sin coste adicional, puede higienizar su unidad dental con la frecuencia que desee.

Desinfección automática de los canales de agua de los instrumentos.

El Model One puede configurarse con un sistema automático de higiene para una desinfección continua. Los desinfectantes recomendados son Alrpon, Sanosil S003 y Dentosept con una solución al 1%.



Soporte higiénico.

Desinfección intensiva de los canales de agua de los instrumentos.

La desinfección intensiva mantiene limpios

los canales del sistema de refrigeración de los instrumentos y no es necesario utilizar otros medios de desinfección. Los desinfectantes recomendados son Alrpon, Sanosil S003 y Dentosept en una concentración del 100%.



Mangueras de instrumentos en un soporte higiénico.

El sistema automático de higiene ofrece 4 opciones de configuración:



Higienización automática de mangueras de aspiración grandes y pequeñas.

- | | |
|--|--|
| 1.
Higienización al comienzo de la jornada. | 2.
Higienización después del tratamiento. |
| 3.
Higienización al final de la jornada. | 4.
Higienización intensiva. |

Un diseo atemporal.

Hemos dado forma al galardonado diseo de nuestra serie Model Pro y lo hemos utilizado para crear el diseo esencial de Model One con el fin de responder a las necesidades b1asicas de los usuarios. Los mismos materiales, las mismas piezas de la estructura exterior y la misma filosofa de diseo orientada a la ergonomia.

Ergonomía y diseo.

La próximavez que recibas a los pacientes, hazles saber que pueden sentirse como si estuvieran en una sof1a. ¿Por qué? Hemos unido estudios con ingenieros en ergonomia de la industria dental para diseoñar esta obra maestra del sillón odontológico, que reducir1a el esfuerzo físico de tus clientes y les proporcionar1a la mayor comodidad posible.



«Sencillo» es poco decir.

Los paneles de control lucen unos pulsadores claros y sencillos, elementos gráficos y un acabado superficial de alta calidad. Lo hemos simplificado todo para permitirte centrar toda la atención de una forma sencilla y cómoda.



Imposible no admirarlo.

Una geometría limpia, una interfaz de usuario bien diseñada, un tamaño compacto y una gran apuesta por la ergonomía. Todo ello para hacer de Model One no solo un deleite para la vista, sino también un gran producto para su uso.



Agradable al tacto.


La mayoría de los materiales utilizados, como el plástico ASA resistente a los rayos UV y a los productos químicos o los metales galvanizados con acabado semimate, pueden equipararse incluso a los productos de clase más alta disponible en el mercado.



En cuanto te sientes, te encantará.

La base del diseño, la ergonomía y los materiales utilizados en Model One nacen de nuestra línea de modelos de clase superior, Model Pro.

- a) El respaldo es lo suficientemente ancho para garantizar el movimiento lateral de la parte superior del cuerpo del paciente.
- b) Para los profesionales más exigentes, un reposacabezas en 3D es esencial para permitir la flexión lateral de la cabeza del paciente.

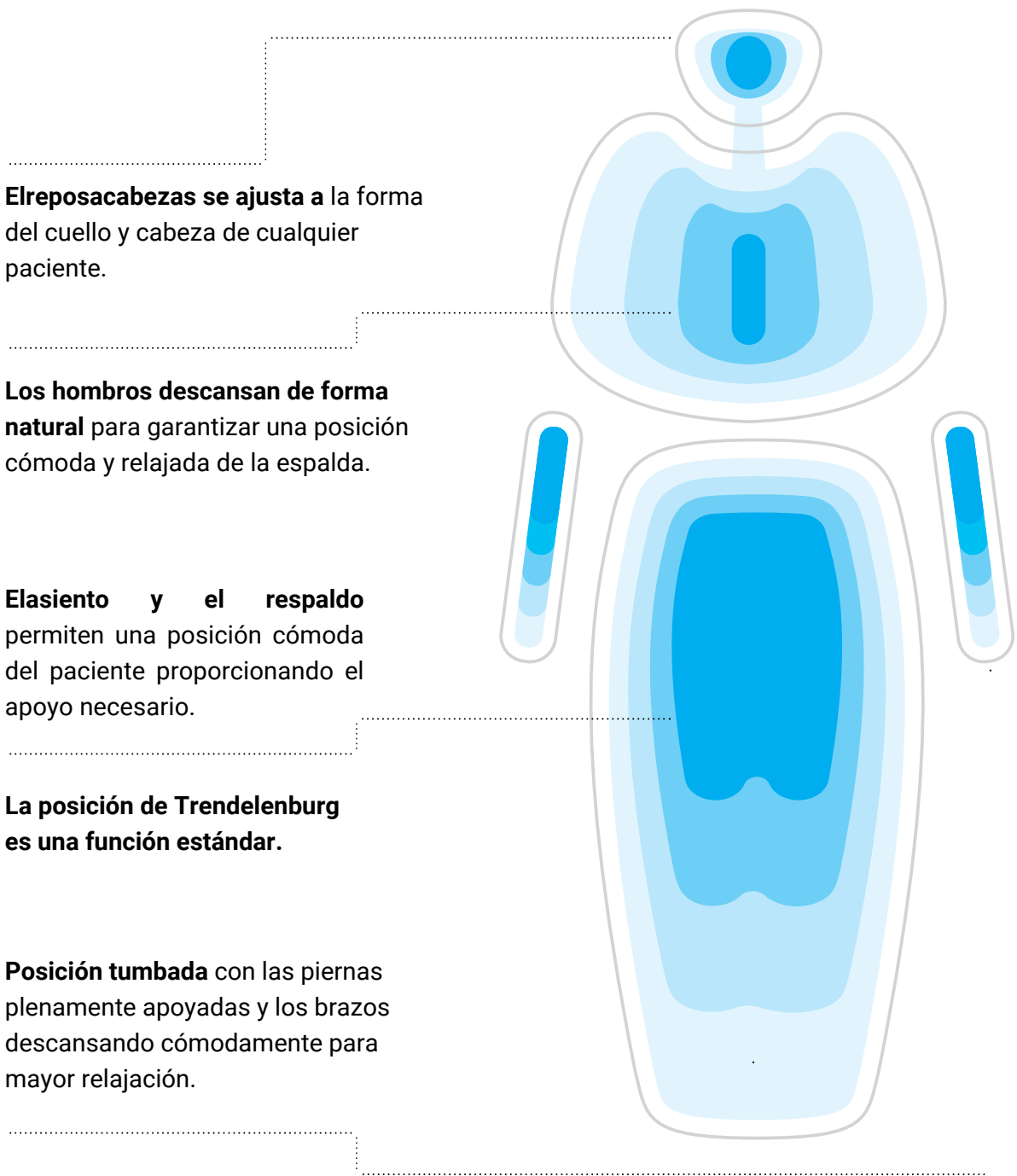


Model One cuida de ti.

Todos se merecen lo mejor: no solo el profesional, sino tu paciente también. Los problemas musculoesqueléticos parecen ser la principal causa prematura de los odontólogos.

Una buena ergonomía es esencial para tu salud a largo plazo. Model One cumple con todas las condiciones para garantizar un trabajo ergonómico, desde el tratamiento palatino hasta las posiciones de intervención operativa.

Algunos de los aspectos ergonómicos más destacados:

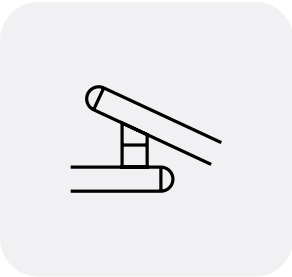

Los brazos de la unidad dental están adaptados para garantizar la ergonomía de tu trabajo diario.



El respaldo permite el movimiento lateral de la parte superior del cuerpo del paciente.



El grosor mínimo del respaldo permite al dentista acercarse a la cabeza del paciente.



La bandeja de instrumentos y el área del auxiliar permiten un posicionamiento muy cercano para un tratamiento a dos manos en la posición de las 12 en punto.



El área del auxiliar permite liberar el espacio necesario para el tratamiento a cuatro manos.

¿Te sientes aventurero?

Haz lo que te gusta, tienes la libertad de expresarte. Con la posibilidad de elegir entre múltiples colores y materiales de recubrimiento, todo depende de tus preferencias. Echa un vistazo a las opciones más populares. Todas las opciones disponibles se pueden consultar en nuestro.



Tapizado estándar.

Sin costuras, fácil de limpiar, resistente al desgaste, a los desinfectantes y lavable. Fácil fijación sin tornillos.



Tapizado confort.

Mayor comodidad, con costuras para un diseño elegante, resistente al desgaste, a los desinfectantes y lavable. Fácil fijación sin tornillos.



Tapizado premium.

Máxima comodidad, espuma activa, con costuras para un diseño elegante, resistente al desgaste, a los desinfectantes y lavable. Fácil fijación sin tornillos.



Colección estándar.
8 colores.



Colección especial.
20 colores.



Colección antimicrobiana.
15 colores.



Colección premium.
21 colores.




Elige un color personalizado para el tapizado y el revestimiento de plástico.



Expresa tu estilo



Elige entre nuevas opciones de color y combina el tapizado con otros elementos de la unidad dental.

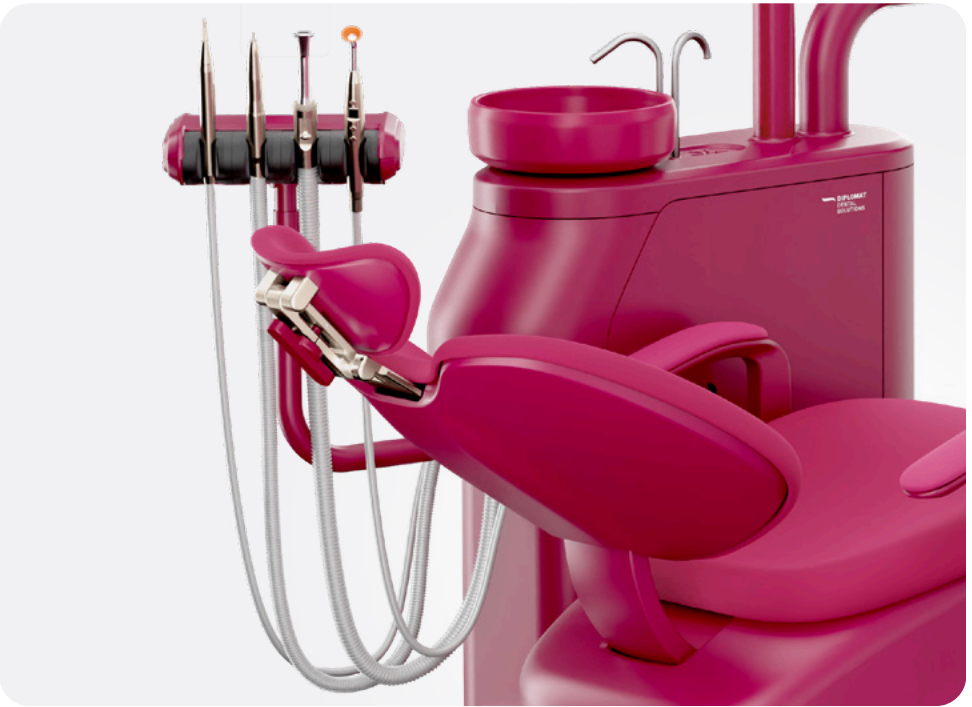

Las fotos de unidades pintadas completas presentadas son demostrativas. Algunos de los elementos de la unidad, como las láminas (panel de control, elemento auxiliar), los soportes de los instrumentos, los brazos del látigo, las cubiertas de goma, deben permanecer en los colores originales, no se pueden pintar. Consulte a su distribuidor para más detalles.

Un aliado de confianza.

La facilidad de uso y las funciones esenciales reflejan la filosofía principal detrás de Model One. Incluso en el primer día de trabajo con Model One, tendrás la impresión de haber trabajado toda la vida.

En tu hábitat natural.

Model One proporciona un acceso cómodo y rápido a todos los mandos, los instrumentos y los paneles de control en todo momento.

Comodidad para todas las formas.

El mecanismo de elevación del sillón trabaja en un rango muy amplio: de 31 cm a 81,5 cm. Esto permite subir fácilmente incluso a los pacientes más jóvenes. También proporciona un espacio de trabajo cómodo para profesionales de estatura más baja o más robusta.

Instalación más fácil.

La instalación de Model One es muy fácil y rápida, permitiendo empezar a trabajar prácticamente nada más recibir la unidad.



Diplomat Dental by Bien-Air – precisión suiza al alcance de tu mano.

Tu pieza de mano es mucho más que una herramienta – es una extensión de tu experiencia.

Por eso, las piezas de mano Diplomat Dental by Bien-Air están diseñadas para ofrecer una precisión, durabilidad y comodidad incomparables en cada procedimiento.

Calidad sin compromisos.

La excelencia suiza garantiza un funcionamiento suave, un equilibrio perfecto y un rendimiento duradero.

Fiabilidad excepcional.

Built to withstand intensive daily use while maintaining consistent power and minimal vibrations.

Tranquilidad garantizada.

Disfruta de una garantía de 2 años que garantiza fiabilidad a largo plazo y confianza en cada procedimiento.

Soporte técnico global.

Dondequiera que estés, el servicio experto siempre está al alcance.

Integración perfecta.

Mejora tu unidad Diplomat Dental con instrumentos suizos de alta gama para una experiencia clínica superior.


Pro line.

- Diplomat CA NOVA 1:5L
- Diplomat CA NOVA 1:1L
- Diplomat TORNADO LED/LK

Classic line.

- Diplomat CA 1:5L
- Diplomat CA 1:1L
- Diplomat BORA 2 LED/LK
- CA 20:1L Micro series
- PM 1:1 Micro series

Precisión, durabilidad y rendimiento – porque una gran odontología comienza con grandes instrumentos.

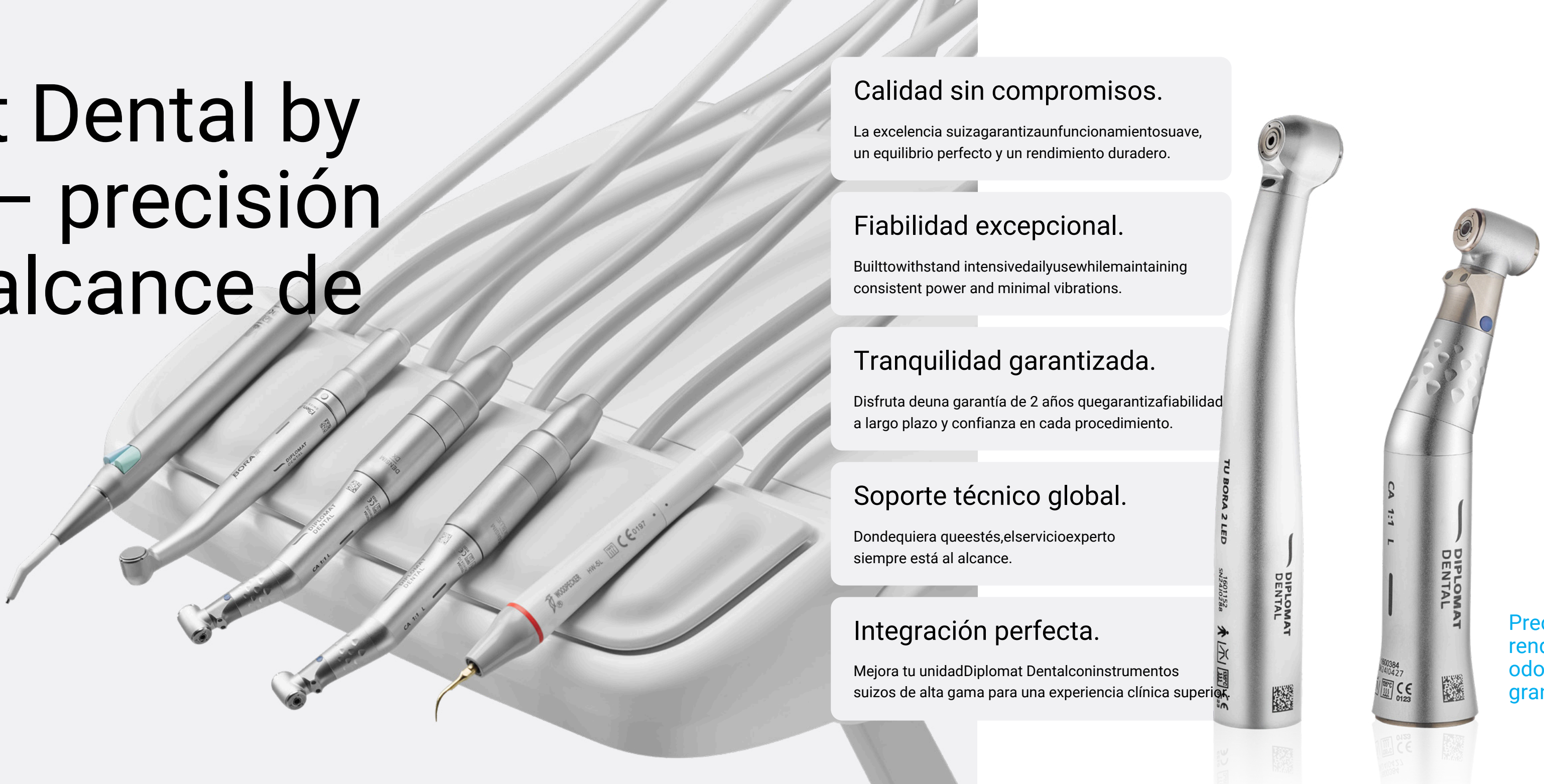

IRIS – la nueva generación de taburetes dentales.

IRIS es una línea moderna de taburetes dentales creada para centrarse en lo que realmente importa: ergonomía, durabilidad y diseño atemporal. Desarrollado para dentistas y asistentes, IRIS permite un tratamiento sentado cómodo, saludable y eficiente.

Materiales cuidadosamente seleccionados, ingeniería de precisión y cumplimiento de normas internacionales (EN ISO 7493) hacen de IRIS una opción fiable para cualquier clínica dental. Su diseño limpio y contemporáneo encaja perfectamente en cualquier sala de tratamiento, asegurando armonía visual y apariencia profesional.



Beneficios clave.

Ergonomía. Promueve una postura saludable, reduce la fatiga y apoya a los dentistas durante largas horas de trabajo.

Durabilidad. Construido para durar, incluso bajo uso diario intensivo.

Diseño. Atemporal, versátil y perfectamente integrado en cualquier espacio de trabajo dental.

Versiones.

IRIS con respaldo Classic. Altura ajustable con pistón neumático:

- Altura mínima del asiento: 490 mm.
- Altura máxima del asiento: 650 mm.

IRIS con respaldo Classic + brazo de soporte “Banana”. Mismo rango de altura que arriba, con soporte lateral adicional para procedimientos más exigentes.





Diseñado para la postura, construido para la precisión.

Siéntate de forma más inteligente.
Trabaja más tiempo.

Donde el equilibrio se encuentra con el rendimiento.



Comodidad que se mueve contigo.



Opciones de mecanismo.

Versión básica. Ajustes simples de la altura del asiento.

Mecanismo Ergo avanzado. Inclinación del asiento, inclinación del respaldo y ajuste de la altura del asiento para una comodidad totalmente personalizada.

Comodidad y materiales.

Asiento de espuma PUR moldeada con forma ergonómica. Máxima comodidad, durabilidad y distribución uniforme del peso (una mejora importante respecto a la espuma tradicional).

Respaldo anatómico. Soporte estable durante trabajos de precisión.

Accesorios y opciones.

- Reposabrazos lado izquierdo y derecho.
- Reposabrazos especiales para usuarios de microscopio.
- Anillo para pies para soporte adicional de las piernas.
- Ruedas con sistema de freno para posicionamiento estable.

Orientación hacia la fiabilidad y alta calidad.


Todos nuestros productos se diseñan y se fabrican cuidadosamente para satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes, cumpliendo siempre con nuestros estándares de alta calidad.



El 90% de nuestros componentes son de fabricación propia. Cada componente de cada unidad dental se comprueba minuciosamente más de 15 veces durante el proceso de fabricación, ya que el trabajo de control se extiende desde la materia prima hasta la unidad dental acabada.

Una de nuestras mayores fortalezas es el equipo de I+D y numerosas colaboraciones con socios experimentados y expertos del sector.

Cada producto nuevo se somete a ensayos internos que se desarrollan en nuestra propia sala de pruebas, lo cual puede llevar de cuatro meses a un año. A continuación,

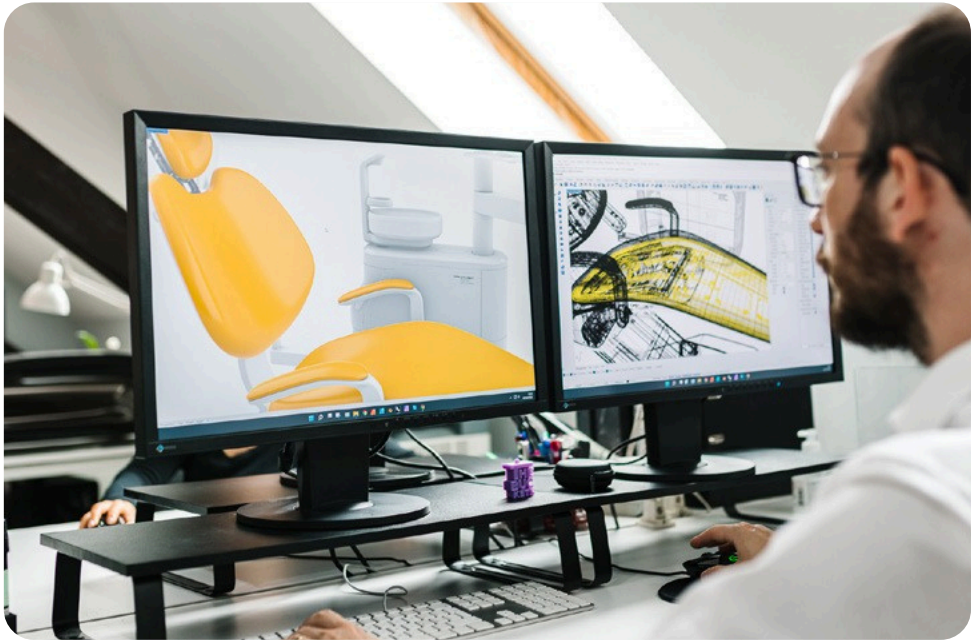

nuestros dentistas responsables de probar las versiones prototipo de los diseños dedican incluso un año a trabajar con los equipos elaborados permitiéndonos aprovechar sus reseñas para perfeccionar los productos.



Los productos de Diplomat Dental permiten un amplio espectro de personalización. Podemos adaptarnos a los requisitos y necesidades específicas de nuestros clientes.




«Nuestra filosofía que respalda los productos ofrecidos consiste en centrarse en plataformas abiertas, soluciones modulares e inteligentes que permitan mejorar el flujo de trabajo de la clínica dental, haciendo que las tecnologías avanzadas y las herramientas inteligentes sean fáciles de usar y accesibles para todos los profesionales.»

Tomas Nerad,
director ejecutivo de Diplomat Dental

Disfruta al máximo con nuestros accesorios.

Echa un vistazo a nuestra gama completa de accesorios compatibles con Model One.

Bandeja de instrumentos

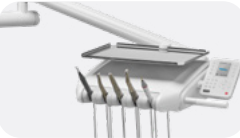

S tandard
Opción de 5 instrumentos de configuración tradicional



S tandard
Opción de 5 instrumentos de configuración continental

Panel de control



Standard
One



Opcional
One Plus

Bandeja



Opcional
Bandeja de aluminio
dimensiones 380x285 mm



Opcional
paraModelo One 100 Ortho
Individual de aluminio
dimensiones 500x290 mm



Opcional
para Modelo One 100 Ortho
Doble bandeja de aluminio
dimensiones 2x 370x290 mm

Ver más opciones en la página 40

Área del auxiliar



Standard
Adaptador en el grupo hídrico de la aspiración quirúrgica.



Opcional
Variante Básica



Opcional
Variante Avanzada

Escupidera



Standard
Escupidera fi ja



Opcional
Escupidera giratoria (solo rotación manual)

Reposacabezas



Standard
2D



Opcional
3D

Monitor



Opcional
Monitor Neovo 22" DR22 blanco con pantalla panorámica
Monitor Neovo 22" RX22G negro con FULL HD pantalla panorámica

Lámpara



Standard
XENOS



Opcional
MAIA



Opcional
SIRIUS

Pedal de control



Standard
Marquardt



Opcional
Nok




Opcional
Swing

Tipos de tapizado



Tapizado estándar
(sin costuras)

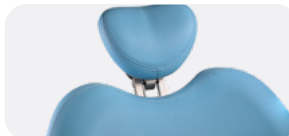


Tapizado confort
(con costuras)




Tapizado premium
(con costuras)
con espuma active


Colecciones de colores de tapizado

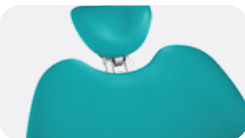


Colección
estándar

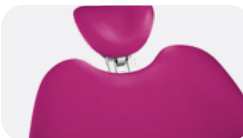

Colección
especial

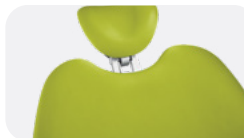

Colección
antimicrobiana

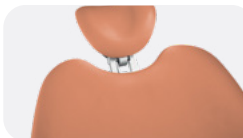

Colección premium
(solo para tapizado premium)

Grupo hídrico



Standard
Mangueras de aspiración grande y pequeña con regulación manual (un filtro)



Opcional
Mangueras de aspiración grande y pequeña con válvula selectora (dos filtros)

Taburete



Opcional
Con respaldo para el dentista, Con respaldo para el auxiliar, Sillín para el trabajo con microscopio

Accesorios



Opcional
Almohada para niños



Opcional
Cojines de protección



Opcional
Pintura completa en blanco semimate

Elige tus propias características.

Model One 100/Model One 100 Ortho	
Placa para colocación no permanente / suelos flotantes / exposición	☐
Movimiento sincronizado del respaldo y el sillón del paciente	☐
Reposacabezas 2D	☐
Reposacabezas 3D	☐
Reposabrazos izquierdo	☐
Reposabrazos derecho	☐
Almohada para niños	☐
Cojín de protección	☐

Bandeja de instrumentos	
Configuración continental con 5 instrumentos	☐
Configuración tradicional con 5 instrumentos	☐

Bandeja	
Bandeja de aluminio 380x285 mm	☐
Opcional para Estilo Tradicional (TS) – Izquierda 380x285 mm	☐
Opcional para Estilo Tradicional (TS) – Doble 2x 380x285 mm	☐
Opcional para Modelo One 100 Ortho – Individual de aluminio 500x290 mm	☐
Opcional para Modelo One 100 Ortho – Doble de aluminio 2x 370x290 mm	☐

Escupidera	
Escupidera fija	☐
Escupidera giratoria (solo rotación manual)	☐

Versión en color de las unidades dentales	
Conjunto de colores pintado en la unidad de agua – es posible elegir entre todos los colores	☐
Unidad completa pintada en semi mate	☐
Unidad completa pintada en color personalizado	☐

Configura Model One para convertirlo en la unidad dental de tus sueños.

Model One 200	
Placa para colocación no permanente / suelos flotantes / exposición	☐
Movimiento sincronizado del respaldo y el sillón del paciente	☐
Reposacabezas 2D	☐
Reposacabezas 3D	☐
Reposabrazos izquierdo	☐
Reposabrazos derecho	☐
Almohada para niños	☐
Cojín de protección	☐

Panel de control	
Panel de control «One» con negatoscopio	☐
Panel de control «One Plus» *obligatorio para ejecutar la función Endo y el proceso de higienizaciónautomática	☐

Tapizado	
Estándar – Acabado liso (sin costuras)	☐
Confort – Mayor comodidad (con costuras)	☐
Premium – Comodidad avanzada con espuma activa y costuras elegantes	☐

Los colores del cuero pueden seleccionarse en el catálogo de tapicería.

Opciones adicionales de la bandeja de instrumentos	
Controladores de agua independientes para cada instrumento	☐
Bloqueo del brazo solo para el sistema de suministro CS (mangueras en colibrí)	☐

Instrumentos del área del auxiliar	
SYRINGE	
Minimate 3F syringe	☐
Minilight 3F syringe	☐
Minilight 6F syringe	☐
Minilight 6F syringe straight with light and module	☐
Miniassistent 3F syringe – INOX (metal), round-shaped	☐
DCI syringe – INOX (metal)	☐

MICROMOTORE	
SET DENSIM DX con accesorios	☐
SET DENSIM DX PRO con accesorios	☐
SET DENSIM DX BLUE con accesorios	☐
SET DENSIM DX PRO BLUE con accesorios, funciones endodónticas de retroceso y avance automático	☐

MANGUERA PARA TURBINA	
Manguera Midwest con fibra óptica para turbina	☐
Ajuste de la potencia de la turbina	☐

ESCALADOR	
LM-ProPower UltraLED con luz y módulo (4 puntas)	☐
EMS MiniPiezon FS-433 sin luz (3 puntas)	☐
EMS MiniPiezon FS-432 LED con luz (3 puntas)	☐
EMS MiniPiezon FS-367 LED con luz (3 puntas)	☐
Satelec SP Xinetiс sin luz (1 punta)	☐
Satelec NEWTRON sin luz (3 puntas)	☐
NEWTRON LED con luz (3 puntas)	☐
NSK VA170 sin luz, con módulo (3 puntas)	☐
NSK VA170 LED-Lux con luz, con módulo (3 puntas)	☐
Woodpecker UDS-N3 LED (6 puntas)	☐

LÁMPARA DE POLIMERIZACIÓN	
Mectron Starlight	☐
Monitex	☐

Elemento auxiliar	
Elemento auxiliar BASIC	☐
Elemento auxiliar ADVANCED	☐
Aspirador quirúrgico con adaptador en la unidad de agua.	☐
Brazo del Elemento auxiliar	
Brazo corto (ideal para tratamientos a 4 manos)	☐
Brauo largo (ideal para tratamientos a 2 manos)	☐
Braccio pantografato regolabile in altezza	☐
Instrumentos del Elemento auxiliar	
Jeringa Minimate 3F Jeringa	☐
Minilight 3F	☐
Mectron Starlight	☐
Lámpara de polimerización Monitex	☐
Rodillos para mangueras de aspiración grandes y pequeñas (2 uds.)	☐
Cámara intraoral USB Diplomat con software para conexión con ordenador y accesorios	☐
Aspirador quirúrgico adicional (no compatible con la opción de «solo Aspirador quirúrgico» ni con ningún separador de amalgama	☐
Pedal de control	
Pedal de control SWING (recomendado por Diplomat Dental)	☐
Pedal de control NOK	☐
Pedal de control Marquart	☐
Lámparas dentales	
MandatoryUser-configurable Xenos (hasta 26.000 Lux)	☐
Faro MAIA LED lamp con sensor	☐
Sirius Essential (35.000 Lux) con sensor	☐
Sirius Plus (35.000 Lux & Composite mode) con sensor	☐
Sirius Power (50.000 Lux & Composite mode) con sensor	☐
Soporte de lámpara	
Soporte de lámpara solo para luz operatoria	☐
Soporte de lámpara para luz operatoria, apto para integración de bandeja adicional	☐
Soporte de lámpara con luz operatoria, apto para integración de bandeja más adaptador para monitor	☐

Instrumentos del asistente para Modelo One 100 Ortho	
MANGUERAS DE SUCCIÓN	
Succión grande (HVE) y pequeña con regulación manual	☐
Succión grande (HVE) y pequeña con válvula de selección	☐
Aspirador quirúrgico	☐
JERINGAS	
Miniassistant 3F	☐
DCI	☐
Luzzani Minimate	☐
Luzzani Minilight	☐
TURBINA (MÁX 1)	
Manguera Midwest con fibra óptica para turbina	☐
Regulación de salida de turbina (para una o dos turbinas)	☐
MICROMOTOR (MAX 1)	
Densim DX	☐
Densim DX Blue	☐
SCALER	
Woodpecker	☐
LÁMPARA DE POLIMERIZACIÓN	
Mectron Starlight	☐
Lámpara de polimerización Monitex	☐
INTRAORAL CAMERA	
	☐
Monitor	
Monitor Neovo 22" DR22 blanco	☐
Monitor Neovo 22" RX22G negro	☐

Sistemas de desinfección	
Desinfección semiautomática de instrumentos con Alpron (botella adicional de 0,6L, 1L, Alpron, adaptador de instrumentos para colocación en la escupidera)	☐
Desinfección automática y continua del mecanismo de llenado de la taza y de las mangueras de instrumentos (incluye botella adicional para el agente desinfectante)	☐
Sistema de aspiración en seco	
Sistema Venturi	☐
Minseparador Cattani	☐
Separador Dürr CS1	☐
Separador agua-aire METASYS ECO-L1	☐
Separador de amalgama MST1 (incluye set de desinfección de muestra + aplicador + recipiente de recambio) con tasa de separación 98,6%	☐
Separador de amalgama Dürr CAS-1 (incluye recipiente de recambio) con tasa de separación 97,9%	☐
Sistema de aspiración en húmedo	
Aspiración húmeda estándar	☐
Recargo por válvula de selección (para clínicas con dos o más sillones dentales)	☐
Recargo por válvula de selección y válvula de escupidera Duerr para aspiración húmeda (el aire de drenaje y aspiración se guía a la máquina de aspiración	☐
Opciones para el suministro centralizado de agua	
Suministro central de agua (incluida regulación de agua a 2,5 bares) + sistema de botella de despresurización	☐
Embudo para acceso cómodo a la botella para el suministro central de agua	☐
Opciones de la unidad de agua	
Botella de agua destilada	☒
Panel frontal para conexiones de medios externos (aire, agua, electricidad), incluye regulador de agua de 2,5 bar	☐
Taburetes	
D10L con respaldo para el dentista	☐
D10L con respaldo para asistente	☐
D10L asiento tipo silla de montar	☐
D10L para microscopio	☐
IRIS con respaldo clásico	☐
IRIS con respaldo clásico + brazo de soporte "Banana"	☐
Opciones sin suministro centralizado de agua	
Regulación de agua a 2,5 bares (necesaria cuando la presión de entrada de agua es demasiado alta)	☐
Sistema de despresurización de la botella	☐
Embudo para acceso cómodo a la botella para la unidad sin suministro central de agua	☐
Ajuste de la manguera de aspiración	
Solo aspiración de mangueras GRANDES (HVE) con ajuste manual	☐
Aspirador quirúrgico	☐
Succión GRANDE (HVE) y PEQUEÑA con regulación manual – un filtro de succión	☐
Succión GRANDE (HVE) y PEQUEÑA con valvula selectora - dos filtros de succión	☐
Garantía	
Periodo de garantía estándar de dos años	☒
Garantía adicional de un año	☐
Garantía adicional de dos años	☐
Garantía adicional de tres años	☐

Descubre el portafolio de Diplomat Dental.



Model Pro 500.



Model Pro 700.

Descubre nuestra serie Model Pro para conocer más sobre la nueva era de la odontología digital.



Model Pro 600.



Model Pro 800.

Descubre el portafolio de Diplomat Dental.




IRIS.



Cart.



Taburetes dentales.

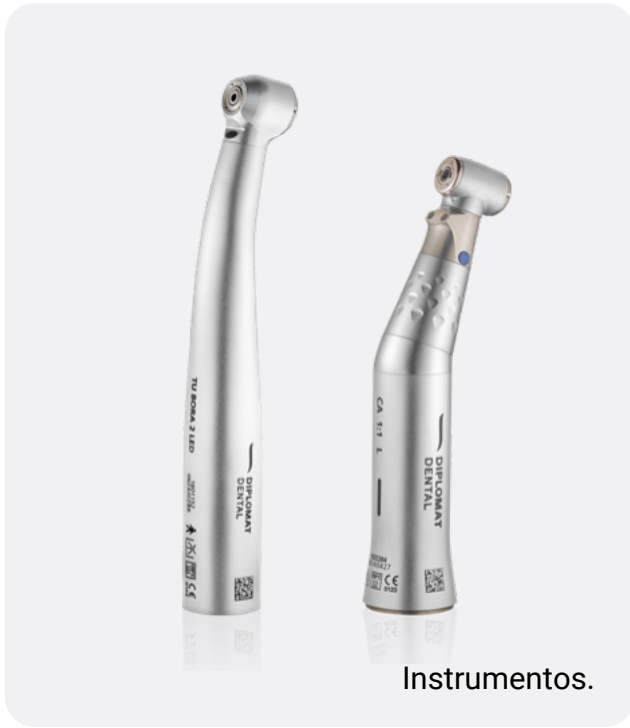

Instrumentos.



Microscopio Densim.



Lámparas dentales.



Compresores.



**SEDE LEGAL
ADMINISTRATIVA.
DIPLOMAT DENTAL s.r.o**

+421 33 7954 111
info@diplomat-dental.com

Síguenos:

-  @diplomat _ dental
-  Diplomat dental
-  Diplomat Dental Solutions
-  Diplomat Dental Solutions

Dirección de fabricación:

DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Vrbovská cesta 17
921 01 Piešťany
Slovak Republic

