


Datos técnicos

VistaIntra DC	
Potencia de entrada	AC 100 – 240 V 10 %, 50/60 Hz
Consumo energético (W)	500
Tensión en tubos (kVp)	60–70
Corriente en tubos (mA)	4–7
Longitud de tubo (mm)	200 (300 opcional)
Colimador (mm)	Ø 60 / 30x40 (20x30 opcional)
Tiempo de exposición (seg.)	0,04–2
Punto focal (mm)	0,4 (IEC 336)
Filtrado total (mm)	Mín. 2,0 Al
Peso (kg)	24,4 / 26,4 / 28,4
Altura (mm)	1730
Longitud de trabajo máx. (mm)	1810 / 1960 / 2260



VistaIntra DC: ideal para todos los receptores de imágenes

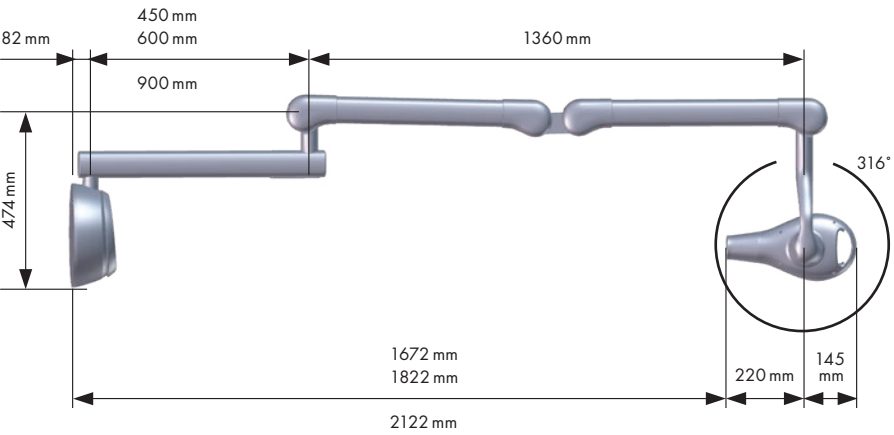

Lector de placas VistaScan



Tecnología sensorial VistaRay

Sistema de rayos X intraoral: perfección en funcionalidad y diseño

Sistema de rayos X intraoral VistaIntra



La fuente perfecta para obtener los mejores resultados en radiografía



Sistema de radiografiado. Todo en un mismo proveedor

Desde hace casi cinco décadas, los dentistas, las clínicas y los centros de radiografías utilizan la experiencia y competencia de Dürr Dental en cuestiones radiográficas. Nuestra excelente tecnología en lectores de placas, sensores y escáneres para la radiografía digital sigue estableciendo nuevos estándares para la radiografía en cuanto a calidad de imagen.

Con el VistalIntra, ahora también ofrecemos un dispositivo de rayos X de alta calidad para realizar excelentes tomas intraorales. Destaca por su avanzada ergonomía y se adapta a la perfección a las placas de Dürr Dental. Con ello, ponemos a su disposición desde la fuente de rayos, pasando por el revelador de placas, el escáner y los sensores, hasta el software de imagen con toda la experiencia y calidad de Dürr Dental. Un sistema que le asegura los mejores resultados de imagen.

No importa qué receptor de imagen se utilice: el VistalIntra forma la base de una perfecta calidad de imagen.

Características destacadas:

- Diseño moderno y reducido para un posicionamiento más fácil y preciso
- Sencillo concepto de manejo
- Perfectamente adaptado al lector de placas radiográficas y al sensor
- Gran fiabilidad y larga vida útil del tubo de rayos X
- Generador DC con punto focal de 0,4 mm

Ser los mejores

Deseamos lograr en todo momento lo mejor para nuestros clientes mediante productos excelentes y servicios extraordinarios. Ese es nuestro objetivo en materia de facilidad de uso, fiabilidad y diseño.

Versátil y muy eficiente

Junto con la singular tecnología de placas radiográficas de Dürr Dental, el VistalIntra es sinónimo de radiografías intraorales precisas, con una perfecta calidad de imagen. El dispositivo radiográfico VistalIntra también está óptimamente preparado para los sensores radiográficos VistaRay, así como para grabaciones de vídeo.

Resultados rápidos y de alta calidad

El VistalIntra ya viene preprogramado de fábrica para cada región dental, exactamente a la dosis de radiación necesaria de las placas radiográficas y sensores de Dürr Dental. De modo que puede utilizarse inmediatamente proporcionando tomas perfectamente impresionadas.




Fácil manejo, gran ergonomía

Gracias al agarradero en el cabezal de rayos X, el VistalIntra se puede posicionar con comodidad y precisión. También resulta extremadamente fácil la selección de la región dental. En caso necesario, los parámetros de rayos X se pueden ajustar con gran precisión y también es posible un cambio rápido entre los ajustes de la radiación, por ejemplo, para el lector de placas y el sensor. Los símbolos del temporizador mejoran el flujo de trabajo y reducen el margen de error.

Tecnología DC para una dosis mínima de radiación

La moderna tecnología DC de VistalIntra proporciona una alta precisión de repetición de la dosis de rayos X y, con ello, una elevada calidad de imagen. Esto aumenta la seguridad de sus pacientes y de sus empleados.

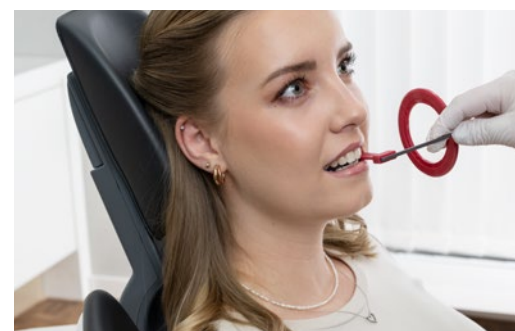

Instalado de manera precisa con la técnica rectangular/paralela

Junto con el nuevo sistema de soporte PSP VistaPosition de Dürr Dental se logran tomas óptimas de un modo sencillo.